

## Notice d'utilisation des pédichiffonnettes

Le kit de prélèvement par pédichiffonnette comprend :  
Une paire de pédichiffonnette (Canards)  
Deux paires de pédichiffonnette (Poulets et dinde)  
Une paire de gants  
Un sac de suremballage avec étiquette de commémoratif.


## Mode opératoire

Mettre les gants.  
Enfiler les pédisacs.

Sortir les pédichiffonnettes, les mettre par dessus les pédisacs.  
Se déplacer à l'intérieur du bâtiment (sur 50% de la surface du bâtiment) en passant sur des zones fraîchement souillées par des fientes : tour des abreuvoirs, zones des trappes,...



Retirer les chaussons, les placer dans le sachet.  
Enfiler la 2<sup>ème</sup> paire de pédichiffonnettes, se déplacer sur la 2<sup>ème</sup> partie du bâtiment .  
Retirer les chaussons, les placer dans le sachet.  
Replacer le tout dans le deuxième sachet (avec étiquette).

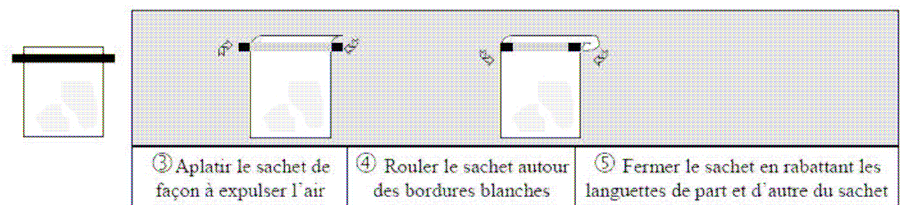

Remplir l'étiquette : date de prélèvement, préleveur N°INUAV etc...  
Replacer le tout dans l'enveloppe de retour.  
Poster dans la journée si possible.

